



STARTER 300

便携式pH计



两用设计，一手掌握

😊 STARTER 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理，简洁易用，集成了多种功能；可广泛应用于科学研究，环境监测，食品饮料等各个行业。STARTER 300符合中国相关标准规范(CMC许可证)，符合CE认证，生产符合ISO9001标准。


为您提供更优性价比的产品，是我们的一贯追求!

屏显丰富，操作简便


- 😊 😐 😞 帮助您直观的了解pH电极状态好坏
- 形象操作提示符，如测量提示符，设置提示符等，让使用更简便
- 最后一次校准数据回显，包括零电位和斜率
- 一键切换pH或mV测量模式
- 自动判断报错提示，快速解决问题

测量精准，软件智能

- 自动和手动温度补偿，标配三合一pH电极
- 自动/手动终点
- 自动识别缓冲液
- 30组测量数据存储
- 电池电量显示，10分钟无操作电源自动关闭

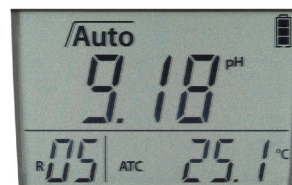

自动终点

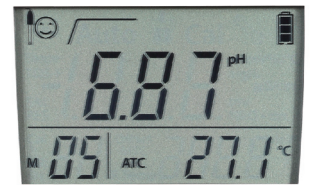

手动终点



最后校准数据



STARTER 300 便携式pH计



IP54套件



仪表支脚

便携式pH计STARTER 300

计量技术参数	(0.00~14.00) pH (-1999~1999) mV 0.01级
电子测量范围	0.00...14.00 pH -1999...1999 mV 0 °C...100 °C
分辨率	0.01 pH 1 mV 0.1 °C
误差限	± 0.01 pH ± 1 mV ± 0.5 °C
校准	3点 1组自定义缓冲液
数据库	30个测量数据 最近一次校准数据
电源	4 x AAA 7号电池 > 500 工作小时
尺寸/重量	90 W x 170 D x 35 H mm 0.18 kg(无电池)
显示器	液晶
输入	BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω Cinch, NTC 30 kΩ
温度补偿	ATC & MTC
IP 保护	IP54
外壳	ABS

选备件:

订货号	描述
80252529	pH电极ST310, 三合一塑壳可充液, 适用于常规澄清液
80252530	pH电极ST210, 二合一塑壳可充液, 适用于常规澄清液
83033017	pH电极ST230, 二合一玻璃可充液, 适用于浑浊液等
83032960	pH电极STPURE, 二合一玻璃可充液, 适用于自来水, 蒸馏水等
83032961	pH电极ST320, 三合一塑壳凝胶免充液, 适用于常规澄清液
83032959	温度电极STTEMP30, 热敏电阻为NTC 30 kΩ
30038552	ORP电极STORP2, 玻璃杆铂圈可充液, 适用样品范围广
30038554	ORP电极STORP1, 塑料杆铂片凝胶免充液, 适用一般样品
80252531	缓冲液粉剂套件(4.00;6.86;9.18), 各3小袋, 每袋可配250ml溶液
30031635	便携包
83032962	IP54密封套件
83032963	便携表腕带

感谢您选择奥豪斯电化学产品! 精准, 不仅是天平。

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。

多功能的工业设计

- IP54防水防尘
- 按键设计紧凑, 单手可操作
- 仪表支脚可立可卧, 桌面使用时可调整屏幕视角
- 电极夹可装于仪表任意一侧, 腕带防跌落
- 产品识别区帮助快速识别和资产管理

订货信息/订货号/标准配置

便携式pH计STARTER 300 /B 订货号: 83032227

- STARTER 300 主机仪表
- IP54 防水防尘套件
- 腕带
- 电极夹
- 4节7号电池

便携式pH计STARTER 300 订货号: 83033983

- STARTER 300D 主机仪表
- IP54 防水防尘套件
- 腕带
- 电极夹
- 4节7号电池
- ST320 三合一凝胶电极
- (4.00; 6.86; 9.18) pH缓冲液粉剂套件



奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼
邮编: 200233
电话: (021)64855408
传真: (021)64859748
http://www.ohaus.com
客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center

